


OPEN FIELD 400

本装置はラット、マウス等小動物の行動を観察する装置ですが、動物の不安の測定にも有効です。

不安の行動として動物はフィールドの周辺に行き易く、中央部への侵入が少ないことが不安の指標とされます。

本装置はフィールド全体の行動量及び立上り行動は無論のこと、フィールド周辺での行動量を選択的に測定することが可能です。

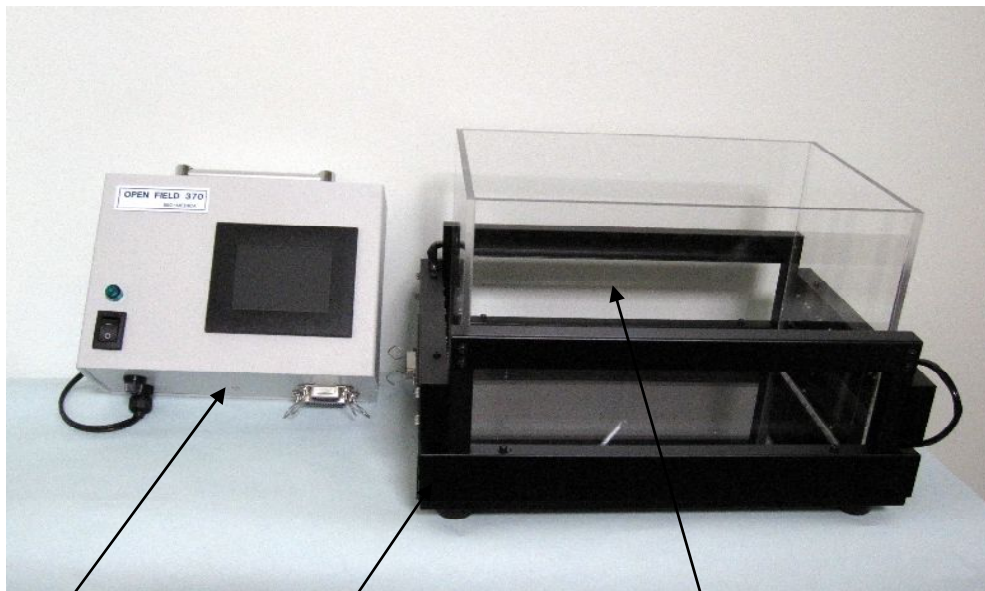

操作部

検出部

実験用ケージ

装置構成： 検出部(フィールド+立上り)、アクリルケージ、操作部
防音箱(オプション)

表示、操作： タッチパネル方式 回数表示、及び各種設定操作

使用電源： AC100V 50/60Hz

株式会社 **バイオ・メディカ**

〒550-0003 大阪市西区京町堀2丁目2-10

TEL 06-6443-9666 FAX 06-6443-3491

info@bio-medica.co.jp <http://www.bio-medica.co.jp>